

Surgery Data Manager

画像転送マニュアル

手術データ（写真・動画・麻酔記録）の取り込みと DICOM 送信

ステラどうぶつ病院

バージョン v0.3.4 / 2026-05-19

目次

1	取り扱うデータ種別	3
2	初回セットアップ	3
3	日常の操作フロー	5
4	同じ症例で複数の SD カードを使うとき	11
5	フォルダ構造の例	12
6	トラブルシューティング	13
7	アップデート / データ保存場所 / DICOM 仕様	14

1. 取り扱うデータ種別

本アプリは手術中に発生する以下の5種類のデータを、SDカード等から院内NASへ転送します。

種別	主なファイル	DICOM送信
手術写真	JPG / PNG / HEIC	○（自動候補）
麻酔モニター記録	CSV / TSV	×
腹腔鏡	MP4 / MOV / JPG	×
気管支鏡	MP4 / MOV / JPG	×
内視鏡	MP4 / MOV / JPG	×

2. 初回セットアップ

アプリを初めて起動したときに行う設定です。一度設定すれば以降は記憶されます。

2.1 NASをマウント

FinderのサイドバーからNAS（例: Stella_8TB）に接続しておきます。/Volumes/Stella_8TB等が見える状態にしてください。

2.2 設定画面で出力ルートと種別フォルダを指定

設定画面の「出力ルート」でNAS上の親フォルダを選びます。続けて5種別それぞれに対応する既存フォルダを「選択...」ボタンから指定してください。

The screenshot displays the 'Settings' (設定) screen of the Surgery Data Manager. At the top, there is a progress bar with steps: 1. 患者情報 (Patient Information), 2. 取り込み元 (Source), 3. プレビュー (Preview), 4. コピー (Copy), 5. DICOM送信 (DICOM Transfer), and 6. 完了 (Complete). The current step is 1. 患者情報.

The main settings area is titled '設定' (Settings) and includes the following sections:

- 出力ルート (ネットワークHDD/NAS)** (Output Path): A text field shows '/Volumes/Stella_8TB'. A button 'フォルダを選択' (Select Folder) is next to it. A yellow warning box below states: 'NASがマウントされていない場合は事前にFinderで接続してください。`/Volumes/` 以下のパスを指定します。' (If NAS is not mounted, please connect it in Finder in advance. Specify the path below ` /Volumes/ `).
- DICOM 送信先 (StellaDICOM 等)** (DICOM Destination):
 - Calling AE Title (自局): A text field with 'SURGERY'.
 - Called AE Title (相手局): A text field with 'STELLADICOM'.
 - Host: A text field with 'stelladicom.local'.
 - Port: A text field with '104'.
 - Modality: A dropdown menu with 'OT' selected.
 - Transfer Syntax: A dropdown menu with 'Implicit VR Little Endian' selected.
 - A button 'C-ECHO で疎通確認' (Check connectivity with C-ECHO) is located below these fields.
- 種別ごとの保存先フォルダ** (Folder for each type):
 - A note: '各種別のデータは指定フォルダ配下に「患者フォルダ」を作って収納されます (例: 手術写真/2026-05-19_P0001_モモ_去勢術/)。絶対パス推奨。空欄や相対パスにすると「出力ルート」配下として解決されます。' (Data of each type is stored in the specified folder hierarchy by creating a 'Patient Folder' (e.g., Surgery Photo/2026-05-19_P0001_Momo_Castration). Absolute path is recommended. If empty or relative path is used, it will be resolved under the 'Output Path').
 - 麻酔モニター記録** (Anesthesia Monitor Record): A text field shows '/Volumes/Stella_8TB/麻酔記録'. A button '選択...' (Select...) is next to it.
 - 手術写真 (DICOM送信対象)** (Surgery Photo (DICOM Transfer Target)): This section is partially visible at the bottom.

設定画面：出力ルート / 種別ごとの保存先 / DICOM 接続先

2.3 DICOM 送信先 (StellaDICOM) の設定

同じ設定画面で DICOM サーバーの情報を入力します。Calling AE Title は任意のラベル (例: SURGERY)、Called AE Title は StellaDICOM 側の値、Host は `stelladicom.local` または IP アドレス、Port は 104 (既定) です。

入力後「C-ECHO で疎通確認」ボタンで接続テストできます。緑文字で「✓ 接続OK」が表示されれば成功です。

3. 日常の操作フロー

6 ステップで完了します。画面上部のステップインジケータで進捗が分かります。

3.1 ステップ1: 患者情報

患者 ID、患者名（カタカナ可）、処置名、日付を入力します。DICOM 送信用の患者名はカタカナから自動でローマ字化されますが、PACS の既登録名に合わせて手動修正できます。


患者情報画面：上部に過去患者の呼び出し一覧、下部に入力フォーム

3.2 ステップ2: 取り込み元を選ぶ

SD カードを Mac

に挿入し、検出されたボリュームから「取り込み元に追加」を押します。追加したソースごとに 種別を 1 つ選択（手術写真 / 麻酔 CSV / 腹腔鏡 / 気管支鏡 / 内視鏡）してください。

「差分インポート（前回以降のみ）」は ON 推奨 です。同じ SD カードを再挿入しても重複コピーされません（SHA-256 ハッシュで判定）。

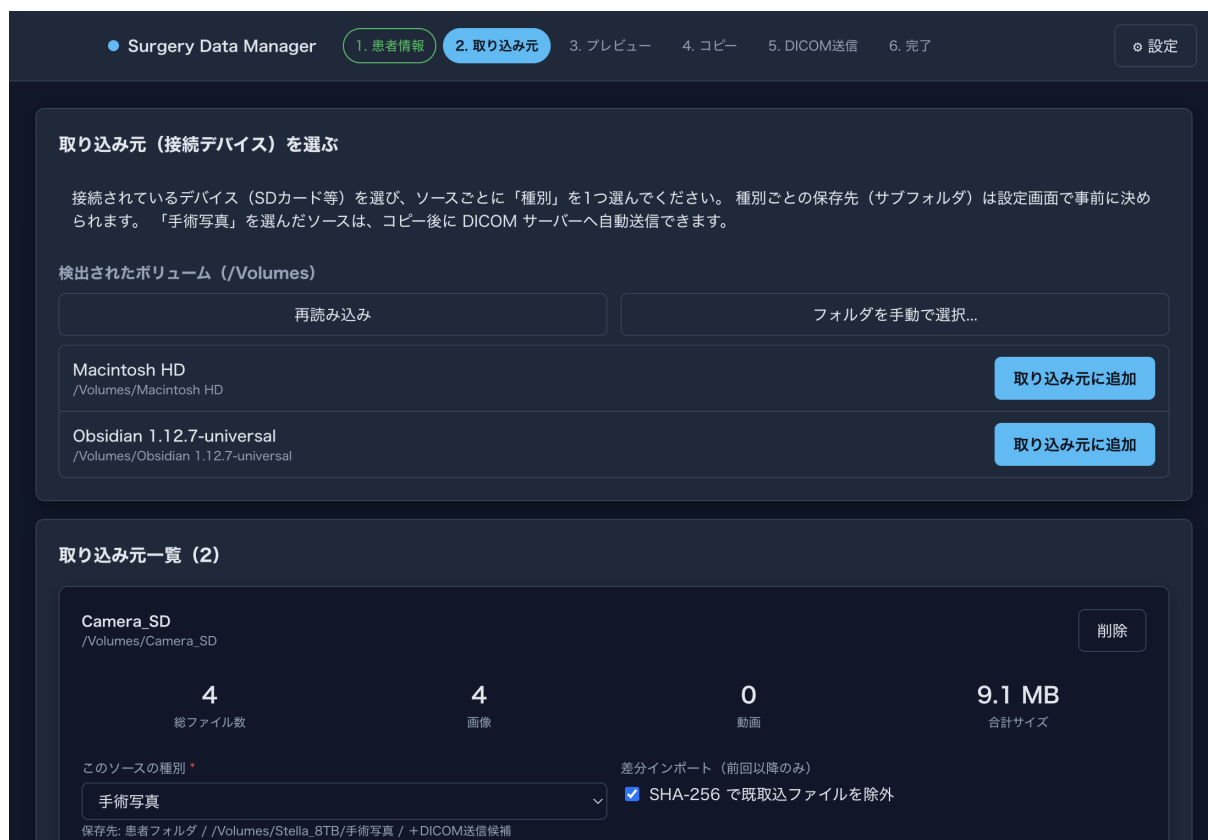


取り込み元選択画面：複数ソースを追加し種別を割り当てる

3.3 ステップ3: プレビューで内容確認

コピー実行前に「何がどこに行くか」を一覧で確認できます。サマリには合計ファイル数、合計サイズ、DICOM 送信候補数が表示され、種別ごとの最終保存先パスも確認できます。


不要なファイルは個別にチェックを外して除外可能です。ソースごとに「全選択」「全解除」「折りたたみ」ボタンがあり、30 件を超えるソースは初期で折りたたまれます。

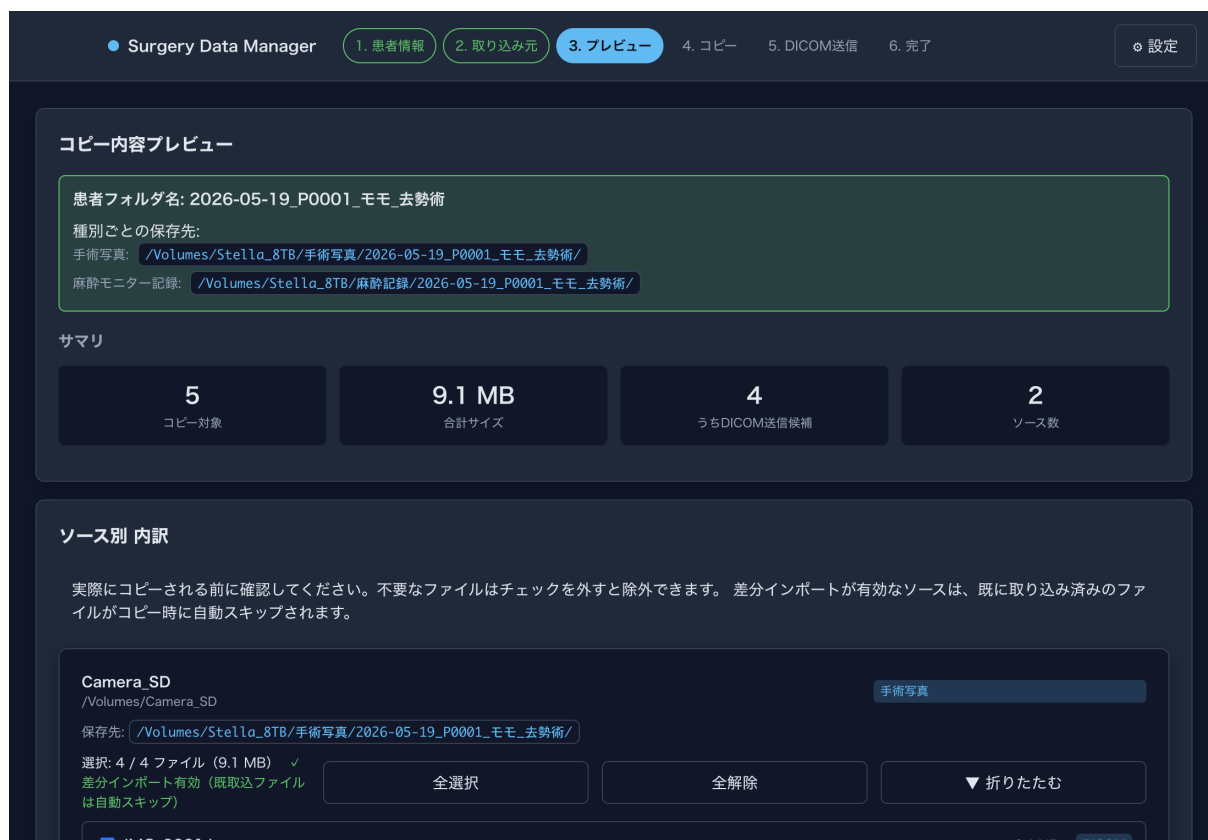

プレビュー画面：サマリ・種別別保存先・ファイル一覧

3.4 ステップ4: コピー実行

「コピー開始」を押すとファイルが順番にコピーされます。SHA-256 ハッシュで重複チェック、コピー後にハッシュ照合（医療データの保全のため）、失敗時は理由をログに表示します。

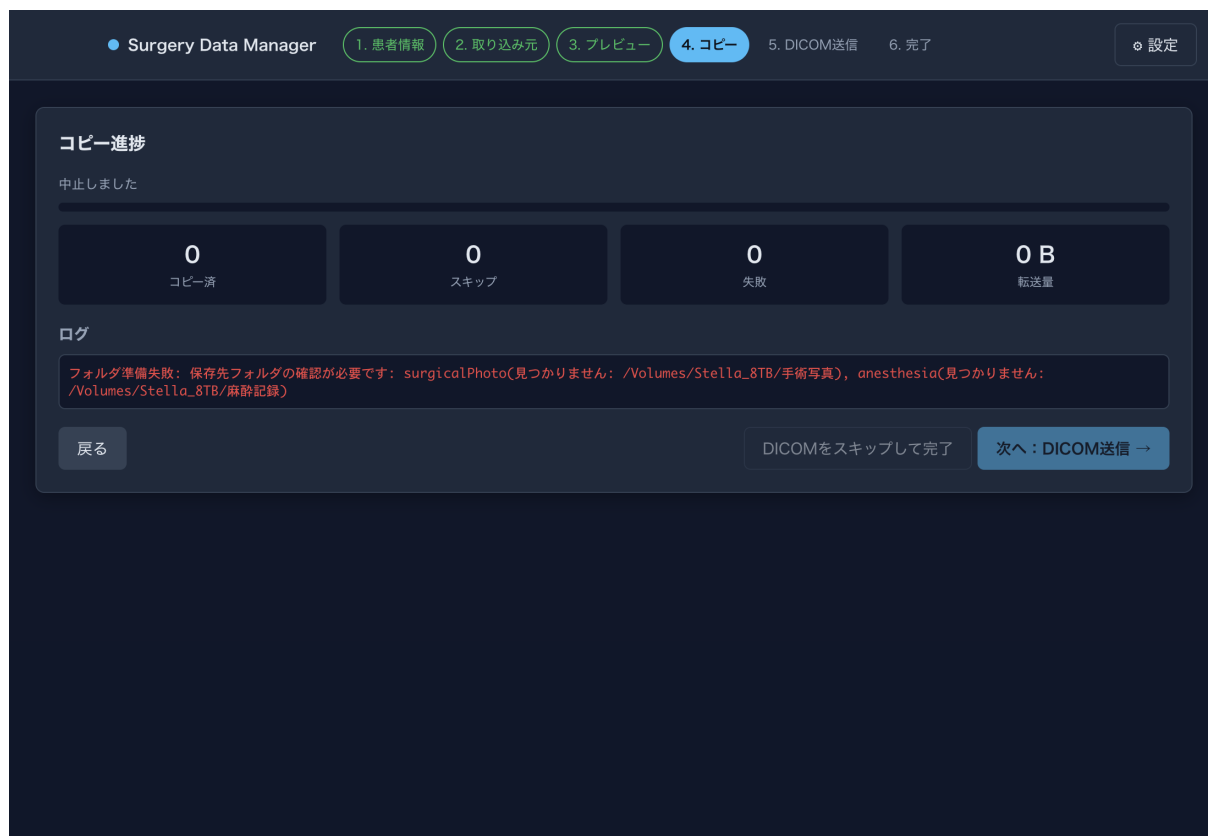


3.5 ステップ5: DICOM 送信（手術写真がある場合）

種別「手術写真」のファイルが取り込まれた場合のみ、続けて DICOM 送信画面が表示されます。送信対象のチェックを確認し「DICOM 送信を実行」で StellaDICOM へ送信します。失敗時は自動で再送キューに登録されます。

DICOM 送信画面：候補一覧と進捗

3.6 ステップ6: 完了

取り込み結果のサマリと種別ごとの「～を開く」ボタンが表示されます。「新しいセッションを開始」で次の症例に進めます。

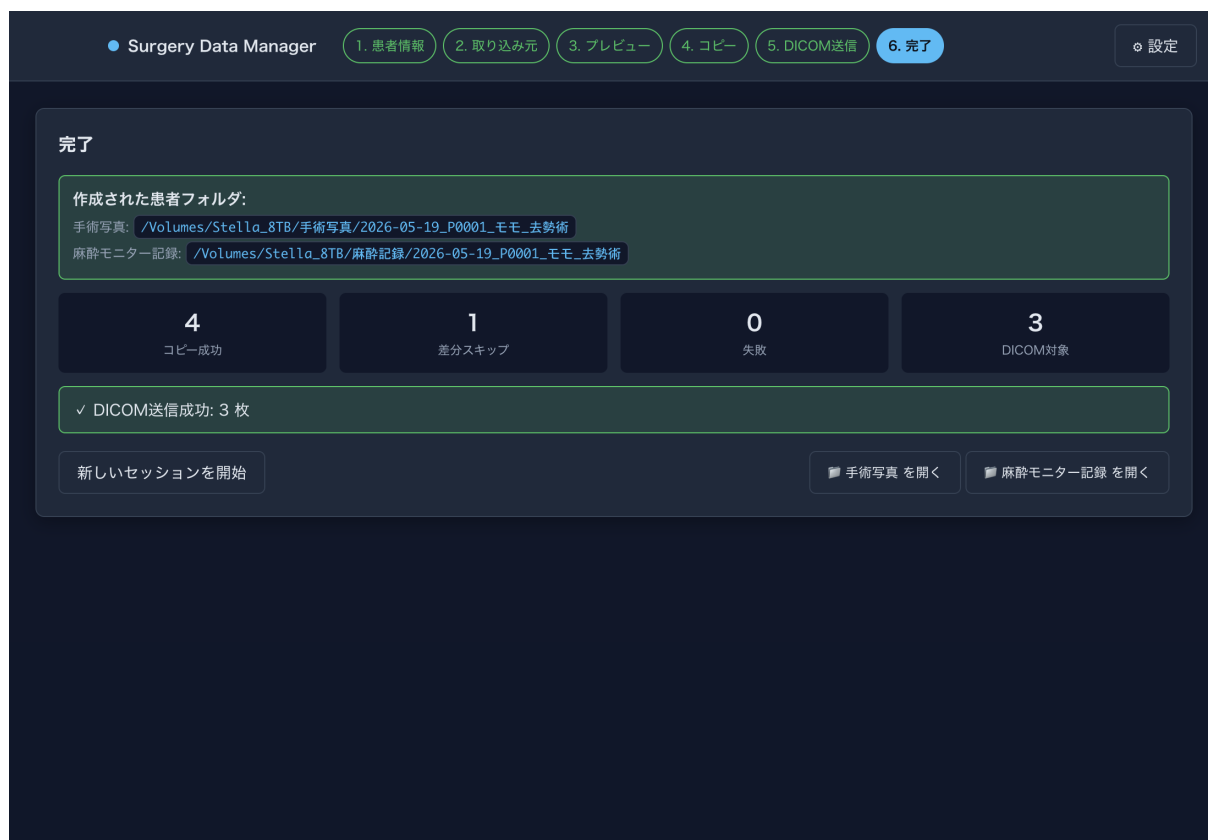

完了画面：種別別フォルダを Finder で開ける

4. 同じ症例で複数の SD カードを使うとき

SD スロットが 1 つしかない場合、SD カードを順番に差し替えながら同じ患者フォルダにデータを追加できます。患者情報を再入力する必要はありません。

1	1 枚目の SD カードを通常通り取り込み完了
2	SD カードを差し替え（2 枚目を挿入）
3	「新しいセッションを開始」で患者情報画面に戻る
4	画面上部の「過去の患者から呼び出す」一覧に先ほどの症例が表示される
5	「呼び出す」ボタン → フォームが自動入力、緑バッジ表示
6	次へ → ソース選択 → コピー
7	同じ患者フォルダに追記される（衝突確認なし）

履歴は過去 30

件まで（最終取り込み時刻の降順）表示されます。フォルダ名、処置名、最終取り込み（○分前 / ○時間前 / ○日前）、取り込み回数、累計ファイル数が見えます。不要になった履歴は「削除」で除去できます（実フォルダは残ります）。

5. フォルダ構造の例

各種別フォルダ配下に患者フォルダ（■■_ID_■_■■■）が作られ、その中に元ファイル名のままコピーされます。

```
/Volumes/Stella_8TB/  
■■■ ■■■■/  
■ ■■■ 2026-05-19_P0001_■■_■■■/  
■ ■ ■■■ IMG_0001.jpg  
■ ■ ■■■ IMG_0002.jpg  
■ ■ ■■■ ...  
■ ■■■ 2026-05-19_P0002_■■■_■■■/  
■ ■■■ ...  
■■■ ■■■■/  
■ ■■■ 2026-05-19_P0001_■■_■■■/  
■ ■■■ anesthesia_log.csv  
■■■ ■■■/  
■ ■■■ 2026-05-19_P0001_■■_■■■/  
■ ■■■ lap_video.mp4  
■■■ ■■■■/  
■■■ ■■■■/
```

6. トラブルシューティング

症状	原因 / 対処
「出力ルートが見つかりません」エラー	NAS が切断された。Finder で再マウントしてから再試行
「保存先フォルダの確認が必要です」	種別フォルダのいずれかが存在しない。設定画面で再確認
同名フォルダが既存です（衝突ダイアログ）	過去の患者の呼び出しを使えば衝突確認なしで追記できる。手動入力なら「追記」を選ぶ
DICOM 送信が失敗する	C-ECHO で疎通確認 → AE Title / Host / Port の見直し。失敗分は再送キューに残る
カタカナ名がローマ字変換されない	「DICOM 送信用 患者名」欄が手動入力された後は自動変換が止まる。空欄に戻せば再開
同じファイルを 2 回コピーしてしまう	差分インポート（SHA-256）が ON なら 2 回目は自動スキップされる

7. アップデート / データ保存場所 / DICOM 仕様

7.1 アップデート

起動時に GitHub Releases を自動チェックします。新版があればダイアログで通知されます。手動チェックは設定画面の「今すぐアップデートを確認」ボタンから可能です。

配信先: <https://github.com/roon1115/surgery-data-manager/releases>

7.2 データ保存場所

種別	場所
患者データ実体	設定で指定した種別フォルダ配下
取り込み履歴 (SHA-256 DB)	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/ingest.json
過去患者の呼び出し履歴	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/history.json
設定	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/config.json

7.3 DICOM 送信仕様 (参考)

項目	値
SOP Class	Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7)
Transfer Syntax	Implicit VR Little Endian (1.2.840.10008.1.2)
Specific Character Set	ISO_IR 100 (ASCII) 固定
PatientID / PatientName	ASCII フィルタ済み (非 ASCII は除去)
Modality	OT (Other)
StudyDate / StudyTime	取り込み日時から自動